

機械器具(39) 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001


コッヘル止血鉗子

【警告】

- 使用後に本品を取り扱う際は、必ず手袋を着用するなど感染対策に努めること。[感染等のおそれがあります。]
- 曲げたり、削ったり等の加工を行わないこと。
[破損の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

●形状

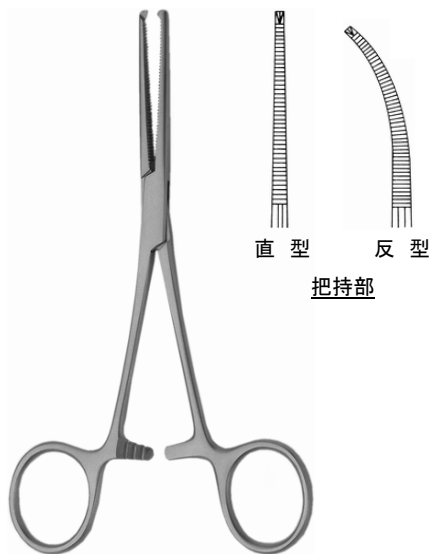

●関節部 BOX-LOCK

●品目構成

カタログ番号	把持部	鉤 形	全 長	原材料
tk 12078-13	直 型	有 鉤	13cm	ステンレス製
tk 12078-14			14cm	
tk 12078-16			16cm	
tk 12079-13	反 型		13cm	
tk 12079-14			14cm	
tk 12079-16			16cm	

●原理

本品のリング状の近位端を開閉することで、遠位端の把持部が開閉し、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持できる。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は、再使用可能である。

【品目仕様等】

●外観

目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、又は汚染物を認めない。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 使用前に本品が洗浄・滅菌されていることを確認してください。また、傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部の異常等がないことも確認してください。異常が発見された場合は使用を中止してください。
- (2) 使用後は、器具に傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部の異常等がないことを確認してください。特にねじの破損や、部品の欠損等がある場合は、患者の体内に遺残している恐れがあります。直ちにレントゲン検査などにより断片の検索を行い、患者の体内に遺残のないことを確認してください。万一体内に発見された場合は取り出してください。
また使用後は、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、【保守・点検に係る事項】の《洗浄》の内容にしたがって、できるだけ早く洗浄してください。
- (3) 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管してください。

【使用上の注意】

- 本品を購入後、はじめて滅菌する場合は、予め洗浄処理を行なうこと。[特に出荷時に油引き等の防錆処理がなされている場合、油の薄膜は、滅菌時に本品に付着している病原微生物を保護してしまい、感染のおそれがあります。]
- 使用前に本品が洗浄・滅菌されていることを確認すること。[感染のおそれがあります。]
- 使用前に、本品に傷や変形、損傷がないことを必ず確認すること。[手術中に器具の一部が破損し、破片が創傷内に残留して除去できなくなるおそれがあります。]
- 使用前に、本品の可動部に異常等がないことを必ず確認すること。[事故の原因になります。]
- 本品に異常がある場合、又は本品が破損している場合は、「使用禁止」と明示し、使用しないこと。[事故の原因になります。]
- 本品を使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。[事故やけがのおそれがあります。]
- 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。[器具の損傷の原因になります。]

【保守・点検に係る事項】

- 感染防止の為、使用後はできるだけ早く、血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄してください。
- 本品に血液等が付着している場合、洗浄の際に皮膚を傷つけないよう充分注意してください。[感染のおそれがあります。]
- 汚物除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適した物を選択し、適正な濃度で使用してください。
- 洗剤の使用に際しては、洗剤の添付文書を参照してください。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャー・ディスインフェクタ等)で洗浄するときには、器具同士が接触して把持部を損傷することがないように注意してください。また、関節部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。
- 洗剤の残留がないように充分すすぎをしてください。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨します。
- 強アルカリ/強酸性洗剤は、器具を腐食させるおそれがありますので、使用しないでください。誤ってこれらが付着したときには、直ちに水洗いをしてください。また、金属たわしやクレンザー(磨き粉)等は器具の表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 洗浄後、点検し、滅菌してください。なお、滅菌にあたっては、関節部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるように配慮してください。
- 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することをお勧めします。

《洗 淨》

検査・手術終了後、滅菌を行なうまでの感染性低減処置として、下記を目安としてできるだけ早く本品の洗浄を行なってください。なお、洗剤の希釈等の使用方法については、洗剤の添付文書にしたがってください。又、作業者はゴム手袋やマスクなどの、十分な感染対策をしてください。

- (1) 本品をプラスチック製の袋で包装し、プラスチック製の容器に入れるなどの感染防止処理をし、専用の洗浄室まで運びます。
- (2) 本品に付着した血液等の乾燥・固화를防止するため、予備洗浄用スプレー洗剤をムラなく噴霧するか、又は0.25～0.5%で40℃前後の弱アルカリ性酵素洗剤、もしくは0.5～2.0%で40℃前後の中性酵素洗剤に15～20分間浸漬します。
※ 乾燥・固化してしまった付着物に対しては、30分以上の浸漬を必要とする場合がありますが、長時間の浸漬は錆の原因になりますので注意してください。
- (3) 50～60℃の精製水ですすぎを行い、分解された付着物や洗剤を本品から洗い流します。
- (4) すすぎの後、ルーベ等を用いて目視し、付着物が除去されていることを確認します。もし付着物が残留している場合は、0.5～2.0%で40℃前後の中性酵素洗剤に浸漬し、やわらかいブラシを使って付着物を落とした後、再び(3)に戻り、すすぎを行ないます。
- (5) ウォッシャーディスインフェクタ、又は超音波洗浄装置を用いて洗浄を行ないます。その際に使用する洗剤は下記を参照してください。

使用する装置	洗 剤
ウォッシャーディスインフェクタ	●アルカリ性洗剤(無泡性又は低泡性のもの)
超音波洗浄装置	●アルカリ性洗剤 ●弱アルカリ性酵素洗剤(低泡性のもの) ●中性酵素洗剤(低泡性のもの)

なお、インジケータを装置に入れて洗浄するなどして、洗浄効果を確認してください。

- (6) 洗浄後、インジケータやルーベ等を用いた目視で洗浄不全のないことを確認します。もし洗浄不全のある場合は0.5～2.0%で40℃前後の中性酵素洗剤に浸漬し、やわらかいブラシを使って付着物を落とした後、再び(3)以降の手順を行ないます。
- (7) 洗浄終了後は、必ず滅菌を行なってください。

《高圧蒸気滅菌》

下記の条件を目安として高圧蒸気滅菌を行なってください。

絶対圧力	温 度	滅菌時間
170kPa	115℃	30分間
240kPa	126℃	10分間
300kPa	133℃	5～10分間

- 滅菌作業は、滅菌器の取扱説明書にしたがって行なってください。
- 滅菌作業を行なう前に必ず本品が洗浄され、乾燥していることを確認してください。
- 分解の可能な器具は、できる限り分解して滅菌してください。
- 滅菌後の汚染を防ぐため、本品を滅菌する際には必ず本品を包装してください。又、包装する際には空気が入らないように注意してください。
- 蒸気を通しやすくするため、滅菌チャンバー内への器具の詰めすぎに注意してください。
- インジケータを使用するなどして、滅菌効果を確認してください。
- 滅菌後は、包装の破れや乾燥不良のないことを確認し、次の使用時まで汚染のおそれのない方法で保管してください。[包装が不十分だと汚染の原因になります。また、乾燥不良は錆の原因になります。]

《EOG滅菌》

下記の条件を目安としてEOG滅菌を行なってください。

温 度	相対湿度	EOG濃度	滅菌時間
37～60℃	50～60%	450～1,000mg/L	2～4時間

- 滅菌作業は、滅菌器の取扱説明書にしたがって行なってください。
- 滅菌作業を行なう前に必ず本品が洗浄され、乾燥していることを確認してください。
- 分解の可能な器具は、できる限り分解して滅菌してください。
- 滅菌後の汚染を防ぐため、本品を滅菌する際には必ず本品を包装してください。
- インジケータを使用するなどして、滅菌効果を確認してください。
- 滅菌終了後は専用のエアレーター内で、50℃で12時間、または60℃で8時間のエアレーションを行なってください。
- 滅菌後は、包装の破れや乾燥不良のないことを確認し、次の使用時まで汚染のおそれのない方法で保管してください。[包装が不十分だと汚染の原因になります。また、乾燥不良は錆の原因になります。]

《プラズマ滅菌》

- 滅菌作業は、滅菌器の取扱説明書にしたがって行なってください。
- 滅菌作業を行なう前に必ず本品が洗浄され、乾燥していることを確認してください。
- 分解の可能な器具は、できる限り分解して滅菌してください。
- 滅菌後の汚染を防ぐため、本品を滅菌する際には必ず本品を包装してください。
- プラズマ滅菌に用いられる過酸化水素ガスには浸透性がないため、細長い筒状の構造物等では滅菌不全を起こす可能性がありますので注意してください。
- 内腔が密閉されている部品は、真空工程で生じる圧力差により破損する可能性がありますので注意してください。
- インジケータを使用するなどして、滅菌効果を確認してください。
- 滅菌後は、包装の破れや乾燥不良のないことを確認し、次の使用時まで汚染のおそれのない方法で保管してください。[包装が不十分だと汚染の原因になります。また、乾燥不良は錆の原因になります。]

《貯蔵・保管方法及び使用期間等》

- 滅菌後、次の使用時まででは、汚染のおそれのない方法で保管してください。
- 耐用期間は、使用頻度にもよりますが概ね5年を目安としてください。

《参考文献》

- 洗浄について
日本医科器械学会:鋼製小物の洗浄ガイドライン
- 高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌について
監修/厚生省保健医療局結核感染症課 編集/小林寛伊
:消毒と滅菌のガイドライン:107、109
原田直己、千代孝夫、田中孝也
:Emergency nursing Vol.5 No.9:60、62
- プラズマ滅菌について
監修/厚生省保健医療局結核感染症課 編集/小林寛伊
:消毒と滅菌のガイドライン:113

《製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等》

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1
TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■外国製造所

国 名:Germany(ドイツ)
製造業者:TEKNO Medical(テクノメディカル社)